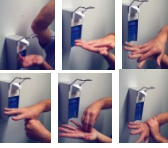


HYGIENE- UND DESINFEKTIONSPLAN

Klinik für Zahnerhaltung, Parodontologie und Präventive Zahnheilkunde

WAS	WANN	WIE	WOMIT	WIE LANGE	WER
HÄNDEDESINFEKTION Hygienisch 	Unmittelbar Vor Patientenkontakt Vor aseptischen Tätigkeiten Nach Kontakt mit potenziell infektiösem Material Nach Patientenkontakt Nach Kontakt mit der direkten Patientenumgebung		Alkoholisches Händedesinfektionsmittel	30 Sek. , bis die Hände trocken sind	Medizinisches Personal Studenten Reinigungspersonal
Chirurgisch	Vor operativen Eingriffen	Ausreichende Menge (3ml = 2Hübe) in die trockenen Hände einreiben		1,5 Minuten, bis die Hände trocken sind	Medizinisches Personal Studenten
INSTRUMENTE - Konservierende Instrumente (für Untersuchung und Behandlung) - Speichelsauger - chirurgische / parodontologische Endodontische Instrumente - Ultraschallspitzen	Unmittelbar nach Gebrauch - Manuelle Vorreinigung grober Verschmutzung	Validiertes Verfahren im Thermodesinfektor		Anschließend: Sterilisation Autoklav	Boxen: Studenten Ambulanz: Medizinisches Personal
- Rotierende Instrumente 	Unmittelbar nach Gebrauch - Manuelle Vorreinigung grober Verschmutzung	In Lösung einlegen Anschließend: Sterilisation	Bohrerbad	15 Minuten	Medizinisches Personal
HAND- UND WINKELSTÜCKE TURBINEN 	Unmittelbar nach Gebrauch - 20 Sek. mit Wasser und Luft durchspülen - Manuelle Vorreinigung grober Verschmutzung	Validiertes Verfahren im Thermodesinfektor Innen: lt. Hersteller	ölen und pflegen	Chirurgisch, parodontologisch oder endodontischer Einsatz Anschließend: Sterilisation Autoklav	Boxen: Studenten Ambulanz: Medizinisches Personal
ANSATZ DER MULTIFUNKTIONSSPRITZE	Nach jedem Patienten	Innen: 60 Sek. mit Wasser und Luft durchspülen Außen: -Wischdesinfizieren -Trocknung abwarten -mit Wasser nachwischen	Flächendesinfektionsmittel aus DG1- Gerät	Anschließend Sterilisation im Autoklav	
ABFORMUNGEN	Direkt nach Entfernung der Abformung aus dem Mund	- sanft mit Wasser abspülen -In Lösung einlegen	Kanipur® Tauchbad	5 Minuten	
RÖNTGENBILDHALTER	Nach jedem Patient	- sanft mit Wasser abspülen - In Lösung einlegen	Sekusept® plus 4%	15 Min	Medizinisches Personal
SPEIBECKEN + Manschette	- Nach jedem Patienten - Am Ende des Behandlungstages	Wischdesinfizieren Reinigen o. Thermodesinfektor	Flächendesinfektionsmittel aus DG1- Gerät	Trocknung abwarten	
ABSAUGANLAGE 	Täglich mittags und abends beide Absaugschläuche auf Desinfektionsstutzen aufsetzen Nach absaugen großer Menge Blut	Spülprogramm Zusätzlich mindestens 1 Liter kaltes Wasser durchspülen	XO Suction Disinfektion Kartusche	6 Minuten	
WASSERZULAUF für Turbinen, Mundduschen usw. der Dentaleinheit WASSERFÜHRENDE SYSTEME	Täglich abends Instrumentenhalter auf dem Speibecken platzieren Täglich zur Beginn des Tages	Desinfektionsprogramm Flush starten 3 Minuten warten/ Einheit ausschalten Einheit anschalten	XO Water-Clean Kartusche (s. Herstellerangaben) Durchspülen bis Anzeige „Flush ok.“	Über Nacht 6 Minuten	Boxen: Studenten Ambulanz: Medizinisches Personal
WASSERFÜHRENDE SYSTEME	Nach jeder Behandlung	Durchspülen der benutzten Systeme mit Wasser		60 Sekunden	
ABSAUGSIEB	Am Ende des Behandlungstages	Reinigen	Unter klarem Wasser	oder Thermodesinfektor	
FLÄCHE • Mobiliar Schränke, Fußanlasser, Rollstühle (ZA, Arzt) • MED. GERÄTE z.B. Micromotor	Am Ende des Behandlungstages Bei Kontamination mit Blut, Sekret und Exkreten	Wischdesinfizieren Mit flächendesinfektionsmittelgetränktem Einmaltuch entfernen. Danach die Fläche wie üblich wischdesinfizieren	Flächendesinfektionsmittel aus DG1 – Gerät	Trocknung abwarten	
SCHWEBETISCH/ Patientennahe Oberflächen, Arbeitsflächen (Zahnarztelement, Behandlungstuhl, Griffleisten, Lampe usw.)	Nach jedem Patienten	Wischdesinfizieren			
PURSEPT WIPES Spenderbox 	- Spätestens nach 28 Tagen - Vor jeder Wiederbefüllung	Wischdesinfizieren	Flächendesinfektionsmittel aus DG1 – Gerät	Trocknung abwarten	
FLÄCHE -Fußboden -Sanitäre Einrichtungen	Reinigungsplan (<i>Betriebscenter</i>) Bei Kontamination mit Blut, Sekret und Exkreten	Reinigen Mit flächendesinfektionsmittelgetränktem Einmaltuch entfernen. Danach die Fläche wischdesinfizieren	Reinigungsmittel Flächendesinfektionsmittel aus dem DG1 – Gerät	Trocknung abwarten	Reinigungspersonal Boxen: Studenten Ambulanz: Medizinisches Personal
ABFALL	Siehe „Dienstanweisung zur Abfallentsorgung und -Verwertung von Abfällen“ (Intranet → Meine Uniklinik → Dienstanweisungen → Dienstanweisung zur Entsorgung und Verwertung von Abfällen)				
BEREICHSKLEIDUNG	Täglich und bei Bedarf (direkt nach Beschmutzung) wechseln				
Erregerspezifische Schutzmaßnahmen	Siehe Hygieneordner -Zahnmedizin				

Weitere Informationen siehe Hygieneordner → Intranet → Patientenversorgung → Krankenhaushygiene und Infektiologie → Hygieneordner → Zahnmedizin